




混匀仪系列

Tube Tumbler Rotator

- 用于各种规格试管的翻转混匀，可胜任从轻柔的旋转到垂直颠倒及各个角度的翻转
- 旋转颠倒，保证试管中样本和试剂的充分混匀
- 翻转柔和，防止剧烈振荡引起的细胞组织、凝胶颗粒等的破坏
- 批量操作，减少实验人员的工作量
- 自动操作，避免了灼伤、感染等偶发事故的发生
- 管架可选，标配一套旋转盘，适用于36×1.5/2.0ml试管。另外有适用于5ml、7ml、15ml及50ml试管的旋转盘可供选择

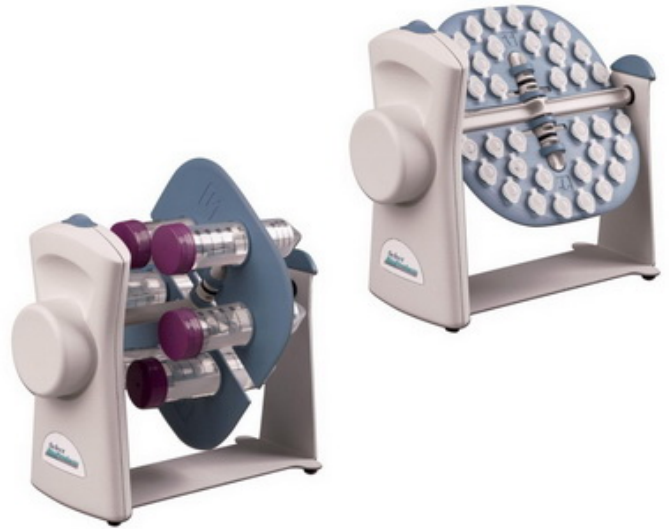

Rock-it Platform Rocker

- 摇动速度与可通过旋钮调节倾斜角度，最大20度
- 低速适用于易碎凝胶的染色等轻柔操作
- 适当提高速度适用于洗膜等实验操作
- 单层/双层平台可供选择
- 最大可承受5kg重量



MiniTwist Nutating Mixer

- 在摇动的基础上，增加三向轨道摆动
- 适用于收集管或离心管中血样的混匀及重悬
- 平台上最多可放置21个标准血液收集管，或30个小型血液收集管，或15个15ml离心管，或9个50ml离心管，或60个微量离心管
- 最大可承受0.8kg重量



	Tube Tumbler Rotator	Rock-it Platform Rocker		MiniTwist Nutating Mixer
Cat#	SBS550-2	SBS300-2 (单层)	SBS300-D-2 (双层)	SBS500-2
速度范围	20rpm		5-120	24rpm
定时	-		20-120min或不定时	-
环境温度范围	4-65℃		4-65℃	4-65℃
最大受重	-		5kg	0.8kg
尺寸(W×D×H)	23.9×12.7×15.3cm		36×38×18cm	24×17×12.5
重量	2.0kg		6.5kg	1kg
电源	230V,50/60Hz		-	230V,50/60Hz

● Tube Tumbler Rotator

选配件

名称	Cat#	适用试管
旋转盘	SBS550-15	10×15ml(φ16mm)+16×5/7(φ12-13mm)
	SBS550-10	36×1.5/2.0ml
	SBS550-50	6×50ml